



PERFECTCOLL™

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PC SKIN TESTER

Pomiar wilgotności skóry





Spis treści



System pomiaru nawilżenia skóry	4
Budowa i dane techniczne	5
Zalecane kosmetyki	6
Sposób użycia	8
Pielęgnacja i konserwacja	10

System pomiaru nawilżenia skóry

Aby nasza skóra prawidłowo funkcjonowała, powinna utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia. W celu utrzymywania skóry w jak najlepszej kondycji zdrowotnej dobrze jest mieć możliwość łatwego, jak i częstego sprawdzania poziomu jej wilgotności.

Przedstawiamy Państwu innowacyjny produkt **PC SKIN TESTER**.

PC SKIN TESTER w łatwy sposób pomaga sprawdzić poziom wilgotności naszej skóry.

Życzymy satysfakcji z użytkowania naszych produktów.

Zarząd, Komitet Naukowy i Pracownicy Perfect Coll Sp. z o.o.



Budowa i dane techniczne PC SKIN TESTER

DANE TECHNICZNE

URZĄDZENIE:	
Nazwa produktu	PC SKIN TESTER
Wymiary	131 x 27 x 24 mm
Waga	69 g
Wilgotność	< 70 %
ZASILANIE:	
Bateria	2 x AAA

MADE IN PRC FOR PERFECT COLL



Zalecane kosmetyki

Używaj **PC SKIN TESTER** jedynie z oryginalnymi kosmetykami PERFECT COLL



1

Przed zabiegiem

PC DETOKSYKACYJNY EKSTRAKT Z DZIKIEGO CHABRA NORWESKIEGO

Najczystszy i najnowocześniejszy, całkowicie naturalny ekstrakt z kwiatów chabru pozyskanego z ekologicznych upraw w Skandynawii, wzbogacony o naturalne enzymy z Organic Kelp (organiczna alga). Delikatnie oczyszcza i łagodzi wrażliwą skórę twarzy, dekoltu i całego ciała. Nie zawiera parabenów, konserwantów chemicznych oraz wysuszającego skórę alkoholu.



2

Po zabiegu

PC PREBIOTYCZNY KREM ŁAGODZĄCY

Naturalny i ekologiczny, innowacyjny krem łagodzący, który ze względu na unikalny skład posiada niezwykle właściwości wspomagające pracę uszkodzonych komórek skóry. Jego składniki odpowiedzialne są za regenerację nawet najbardziej delikatnej skóry, enzymy z owocu papai przynoszą efekt lekkiego rozświetlenia. Jest to jedyny produkt na rynku, który zawiera w składzie enzymy prebiotyczne, co zapewnia mu niezwykle wysoką wchłanianiałość.

SYMBIOZA NAUKI Z NATURĄ

Kosmetyki PERFECT COLL posiadają unikalne, innowacyjne formuły opracowane w biotechnologicznych, proekologicznych laboratoriach polskich uniwersytetów medycznych. Jesteśmy pasjonatami natury i ekologii, dlatego kosmetyki ze znakiem PC są zdrowe dla Twojej skóry.

Kosmetyki PERFECT COLL nie zawierają parabenów, konserwantów chemicznych, pochodnych ropy naftowej (parafina), olei mineralnych oraz wysuszających skórę alkoholi i glikoli, a także drażniącego środka pieniącego Sodium Laureth Sulfate i innych chemicznych, szkodliwych dla skóry substancji.

Szczegółów szukaj w "Katalogu produktów Perfect Coll"



Sposób użycia PC SKIN TESTER




PROSTE KROKI STOSOWANIA PC SKIN TESTER:

- Zdejmij pokrywkę z miernika.
- Wciśnij przycisk Włłącznik.
- Gdy usłyszysz sygnał przyłóż głowicę do skóry.
- Przytrzymaj ok. 10 sekund.
- Urządzenie powiadomi sygnałem dźwiękowym o zakończeniu pomiaru.
- Zmierzona wilgotność zostanie zobrazowana na wyświetlaczu LCD.

Dalsze Instrukcje

- Jeżeli wyświetlacz LCD pokazuje „LO”, wyłącz urządzenie, wyjmij baterie i włóż je ponownie.

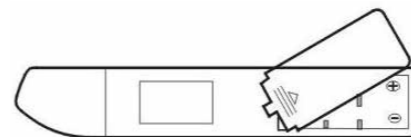

- Jeżeli wynik pomiaru na wyświetlaczu LCD pokazał „UUU” jest to błąd. Proszę wykonać pomiar jeszcze raz wciskając przycisk Reset.



Nie próbuj mierzyć wilgotności skóry na mokrej twarzy.



Częstotliwość zabiegu:
Brak ograniczeń



Czas zabiegu:
10 sekund



Pielęgnacja i konserwacja

- Utrzymuj urządzenie czyste i suche.
- Nie nagrzewaj urządzenia.
- Wymień baterie po miesiącu użytkowania.
- Oczyszć głowicę bezpośrednio po i przed użyciem (spryskaj chusteczkę bądź wacik kosmetyczny spirytusem salicylowym 2 %).



Przechowuj urządzenie czyste i suche.





Centrum Operacyjno-Rozwojowe Perfect Coll Sp. z o.o.

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny (lok. A 210)
Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia



kontakt@perfect-coll.pl



+48 58 698 22 44



www.perfect-coll.pl

